

ملحقات فوناك اللاسلكية للاتصال

حلول مناسبة للبالغين والياfeعين وغايات التعليم



ملحقات فوناك اللاسلكية للاتصال

لمحة عامة عن الملحقات اللاسلكية المناسبة للبالغين والياfeعين وغايات التعليم

للمكالمات الهاتفية

للتلفاز والموسيقى

للتحكم عن بُعد

للمحادثة

DECT



EasyCall

ComPilot
Air II



ComPilot

TVLink



RemoteControl
App



PilotOne

RemoteMic



Roger Clip-On Mic



Roger Pen
Roger EasyPen



للمعلم

للطلاب

للغرف الصفية



Roger inspiro



Roger DynaMic



Roger Receivers



Roger Focus

Roger MyLink



Dynamic
SoundField



AudioHub



DigiMaster X



WallPilot

لمحة عامة عن الملحقات اللاسلكية المناسبة للبالغين واليافعين

TVLink + ComPilot® or ComPilot Air II	RemoteMic + ComPilot Air II ^٤ or ComPilot	ComPilot Air II or ComPilot	Roger Clip-on Mic + Roger X + ComPilot	Roger Clip-on Mic + 2 design integrated receivers or Roger X	Roger EasyPen + Roger X + ComPilot	Roger Pen or Roger EasyPen + 2 design integrated receivers or Roger X	المرسلات
							
							المستقبلات
•	•	•	•	•	•	•	المحادثة بالضحج
•	•	•	•	•	•	•	متحدث واحد عن بُعد
•	•	•	•	•	•	•	وضعية المقابلة أو الاستماع لأكثر من متحدث
•	•	•	•	•	•	•	التلفاز
•	•	•	•	•	•	•	مشغلات الموسيقى وأجهزة الكمبيوتر
•	•	•	•	•	•	•	هاتف محمول ^١
•	•	•	•	•	•	•	هاتف أرضي ^{١,٢,٣}



^١ غير متوافق مع Roger EasyPen

^٢ ينصح باستخدام وصلة BT500 USB 076-0856 في حال واجهت مشكلة عند وصله مع البلوتوث

^٣ يحتاج الى وصلة هاتف MDA200 076-0031

^٤ متوفر بحزمة ComPilot Air II + RemoteMic المناسبة لإجراء حوار

^٥ متوفر بحزمة ComPilot Air II + TvLink المناسبة لسماع الموسيقى والتلفاز

لمحة عامة عن توافق الملحقات اللاسلكية مع السماعات

جيل السماعات

	الملحقات المتوافقة مع سماعات جيل فنتشر					الملحقات المتوافقة مع سماعات جيل كويست و سبايس			
	PilotOne II	ComPilot II	ComPilot Air II	DECT II	EasyCall II ^١	EasyCall ^١	PilotOne	ComPilot	DECT CP1
TVLink S 		•	Streaming ok, charging slot does not fit					•	
TVLink II 		•	•					•	
RemoteMic 		•	•					•	
RemoteControl App 		•	•						

^١ متوفر لدينا أغطية هواتف بلاستيكية لجهاز EasyCall

ملحقات فوناك اللاسلكية الخاصة بالهاتف

Phonak DETC: ملحق فوناك اللاسلكي الخاص بالهاتف الأرضي


هاتف لاسلكي سهل الاستخدام يعمل على نقل المكالمات الهاتفية للسماعتين / الأذنين حيث يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين يتمتعون بسمع طبيعي أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف سمع.



كيفية الاستخدام



مسافة ٤٠ سم
بحد أقصى

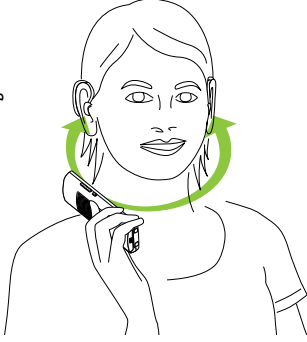

الخصائص:

- لا يحتاج الى برمجة، سهل الاستعمال.
- مزود بخاصية تجريبية لسماع وضوح الصوت.
- يمكن استخدامه كبديل للهواتف الأرضية المتوفرة في الأسواق.
- يمكن تكبير الصوت حتى ١٥ ديسبل بكبسة واحدة.
- يحتوي على زر إعادة الاتصال ويمكنه تخزين أكثر من ٤٠٠ رقم
- ينقل الإشارة لاسلكيا لكلا الأذنين بوقت حقيقي
- زر الإتصال المباشر بالرقم المفضل.

EasyCall: ملحق فوناك اللاسلكي الخاصة بالهاتف الخليوي


يعمل EasyCall على نقل المكالمات الهاتفية لاسلكياً مباشرة من الهاتف الخليوي لكلا السماعتين من خلال البلوتوث ليتمكن مستخدمه من فهم الحديث بوضوح.



كيفية الاستخدام



مسافة ٤٠ سم
بحد أقصى

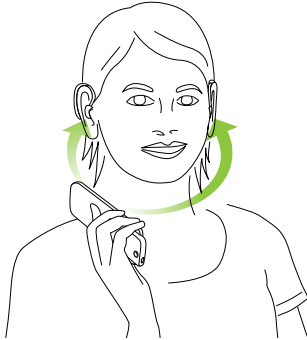

الخصائص:

- لا يحتاج الى برمجة
- فقط ألصق الجهاز بهاتفك الخليوي "لن تنساه او تفقده ابداً"
- يسمح لك بالتحدث لمدة ١٠ ساعات
- بطاريته تدوم اسبوع في حال عدم استخدامه


ملحقات فوناك اللاسلكية الخاصة بالتلفاز والموسيقى والهاتف

Phonak ComPilot Air

يُستخدم جهاز ComPilot Air الصغير الحجم وانيق التصميم مع سماعات فوناك من جيل فنتشر من خلال وصالهما لاسلكياً عبر البلوتوث بأجهزة الهاتف ومشغلات الموسيقى.



كيفية الاستخدام

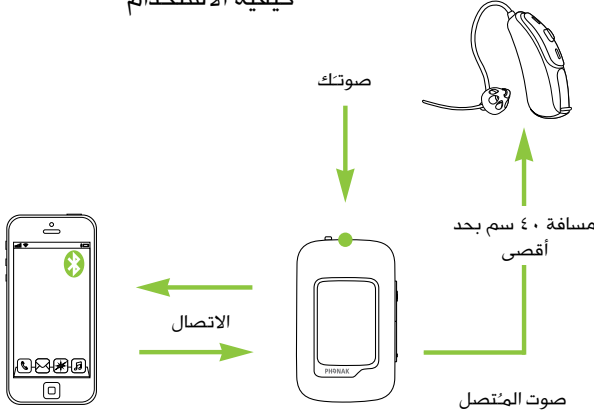

الخصائص:


- لا يحتاج الى برمجة، سهل الاستعمال
- مزود بخاصية تجريبية لسماع وضوح الصوت
- يمنح المستخدم جودة صوت عالية "StereoSound" بكلا الأذنين
- يمكن استخدامه كجهاز تحكم عن بعد للسماعة
- تنبيه المستخدم صوتياً بقراءة اسم المتصل ورقمة
- متوافق مع جميع الأجهزة الإلكترونية المزودة بالبلوتوث
- بطارية تدوم أكثر من ٢٠ ساعة متواصلة
- ينقل الإشارة لاسلكياً لكلا الأذنين بوقت حقيقي

Phonak ComPilot

جهاز فوناك كوم بايلوت يُمكنك من التمتع بمشاهدة برامجك التلفزيونية المفضلة، الإستماع بمشغلات MP3، اجراء مكالماتك الهاتفية بكل أريحية وغيرها الكثير من أجهزة الإتصال الحديثة حيث أن كوم بايلوت يلتقط الأصوات من مصدرها مباشرة ليحولها الى سماعتك و بجودة الستيريو.



كيفية الاستخدام

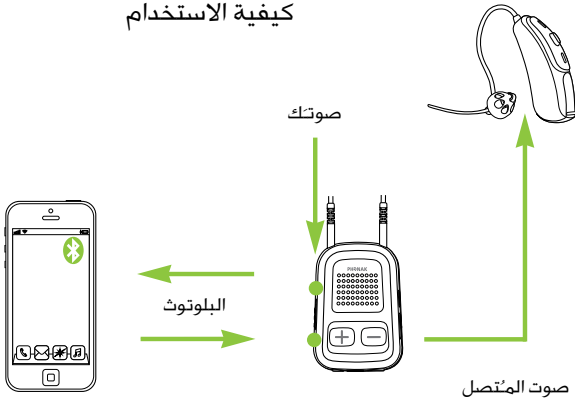

الخصائص:

- لا يحتاج الى برمجته
- يتوافق مع الأجهزة التي تحتوي خاصية البلوتوث و مدخل صوتي.
- بطارية تدوم لأكثر من ٢٠ ساعة
- يقوم بوظيفة جهاز تحكم عن بعد بالسماعة
- تنبيه المستخدم صوتياً بقراءة اسم المتصل ورقمة
- ينقل صوت عالي الجودة لكلا السماعتين

يعتبر حلقة الوصل بين التلفاز او اي مصدر صوتي آخر والسماعة.
جهاز TVLink مع جهاز ComPilot يعملان معا على تحويل صوت برامجك التلفزيونية المفضلة مباشرة الى سماعتك بأفضل جوده و بكل أريحية، حيث يمكنك التحكم بمستوى الصوت كما يناسبك دون التأثير على الأشخاص الآخرين من حولك الذين يشاركونك مشاهدة نفس البرنامج.
يمكنك ضبط الإعدادات بالمنزل بخطوة واحدة خلال ٦٠ ثانية فقط ويصل مدى الإرسال حتى ٣٠ م.




الخصائص:

- متوافق مع الأجهزة السمعية الرقمية والتقليدية.
- سهل التركيب والاستخدام.
- إمكانية تجربة وضوح الصوت الممنوح من قبل الجهاز.
- مزود بقاعدة شحن مناسبة لمعظم ملحقات فوناك اللاسلكية.
- إمكانية التحكم بشدة صوت التلفاز المُرسَل للسماعات.

Phonak RemoteMic: لن تفوتك كلمة بعد اليوم!

تمتع بإجراء حوار فردي واضح ومفهوم عن بعد ولمسافه تصل إلى ٢٠ م باستخدام فوناك ريموت مايك بمايكروفونه الخفي والخفيف اللاسلكي الذي يتم تركيبه مع ComPilot حيث يعمل على التقاط الأصوات من مصدرها مباشرة ونقلها للسماعات.

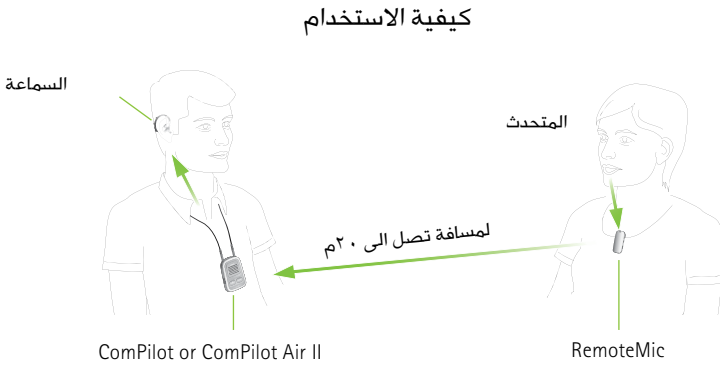

الخصائص:


- مايكروفون لاسلكي صغير الحجم
- بطارية تدوم ٨ ساعات وقابلة للشحن
- متوافق مع أجهزة فوناك اللاسلكية ComPilot, ComPilot Air
- لا يحتاج الى برمجة، سهل الاستعمال

بلمسه بسيطة ستتحكم بصوت سماعتك و برامجها بكل سهولة.

جهاز التحكم عن بعد بايلوت ون || يُمكنك من التحكم بصوت سماعتك و ضبط برامجها بطريقه خفيه لن يلاحظها أحد و بكل سهولة بفضل تصميمه البسيط والأنيق الذي حاز على جوائز عدة.



كيفية الاستخدام

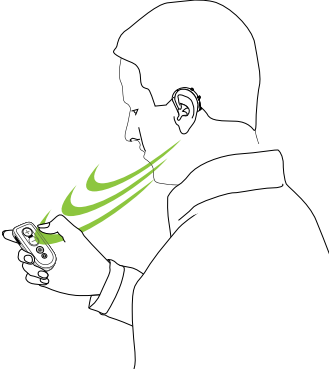


الخصائص:

- سهولة اختيار برنامج السماعه والتحكم بمستوى الصوت
- زر مخصص للانتقال للبرنامج الرئيسي
- زر اغلاق مفاتيح الجهاز



حلول سمعية تساعد على الاستماع في البيئات الضوضائية وعبر المسافات

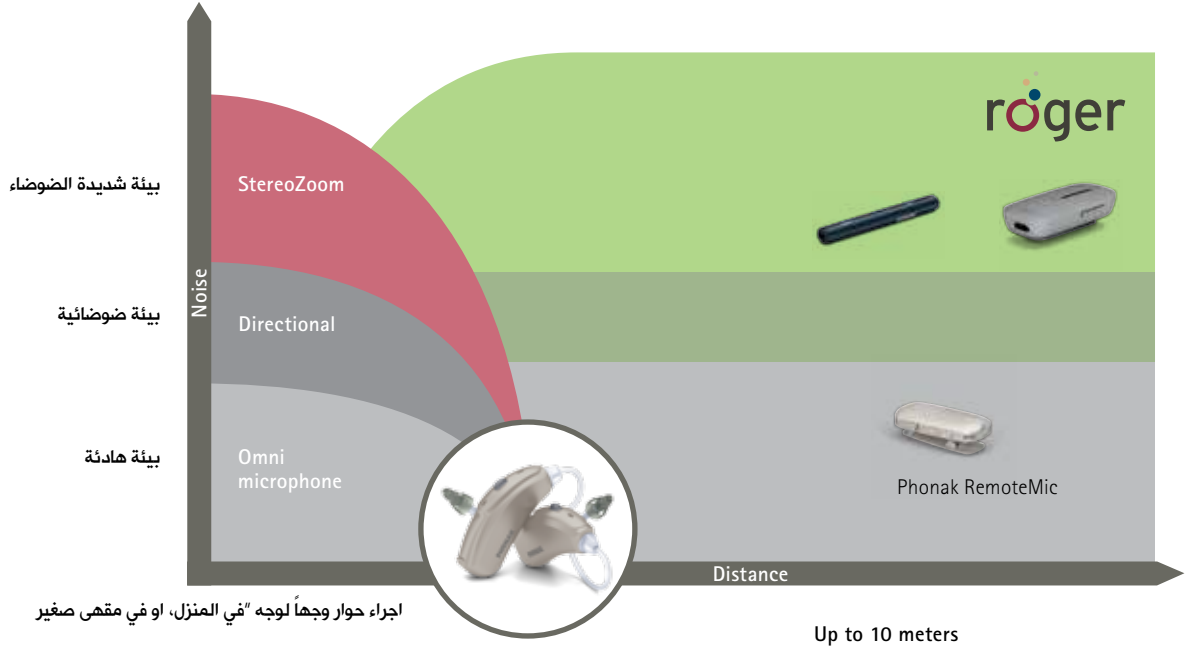

Phonak Roger Pen


قلم روجر ابتكار جديد من فوناك يساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف سمع على فهم الحديث بشكل أوضح في الأماكن الضوضائية وعبر المسافات. يتميز قلم روجر بتصميمه الخفي والأنيق. ويمكن استخدامه مع الهواتف النقالة التي تحتوي على بلوتوث والتلفاز وغيرها الكثير من وسائل الاتصال. يُمكن وضع قلم روجر عند استخدامه على الطاولة أو حمله باليد أو ارتدائه حول عنق المتحدث.



الخصائص:

- أداء متميز في الضجيج
- لا يحتاج الى برمجه
- ضبط أوتوماتيكي للميكروفونات حسب البيئة الصوتية
- متوافق مع جميع الأجهزة التي تحتوي خاصية البلوتوث
- يدوم عمله حتى ٧ ساعات مستمرة
- يغطي حتى ٢٠ م
- يُمكن وصله بعدة أجهزة صوتية من خلال المدخل الصوتي
- مدخل USB صغيره للشحن والتحديث

كيفية الاستخدام

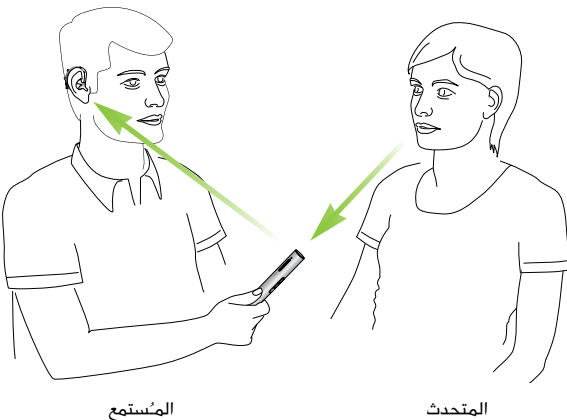


Roger Clip On Mic

مايكروفون لاسلكي صغير الحجم سهل الاستخدام، بكبسة زر واحدة يُمكنك وصلهُ بسماعتك.

يستخدم لنقل الإشارة الكلامية لاسلكياً إلى سماعاتك ليُمكنك من فهم الكلام بشكل أفضل حتى في أصعب البيئات الصوتية. ويُمكن عمل شبكة أكثر من متحدث من خلال ربطه بجهاز Roger Clip On Mic آخر أو جهاز قلم روجر.



كيفية الاستخدام

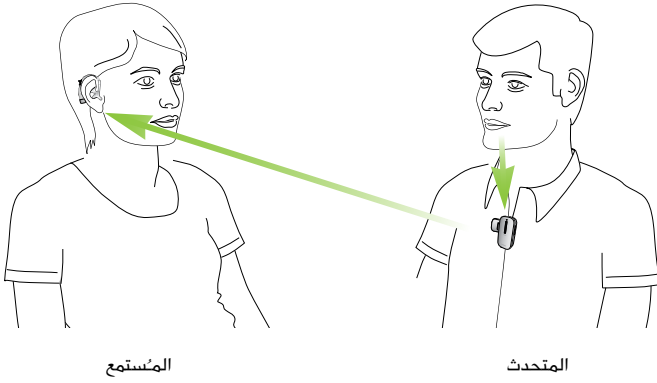

الخصائص:


- أداء متميز في الضجيج
- لا يحتاج إلى برمجه
- يُمكن وصله بعدة أجهزة صوتية من خلال المدخل الصوتي
- يدوم عمله حتى ٦ ساعات مستمرة
- يغطي حتى ٢٠ م
- مدخل USB صغيره للشحن والتحديث

Roger EasyPen

حل ذكي صُمم لمن يبحث عن السهولة في استخدام الأجهزة اللاسلكية للسمع بشكل أفضل بالضجيج وعن بُعد مثل التلفاز، مشغلات الموسيقى، الهواتف وغيرها الكثير من الأجهزة التي تحتوي على مُدخل صوتي لا يعتمد على خاصية البلوتوث.



كيفية الاستخدام

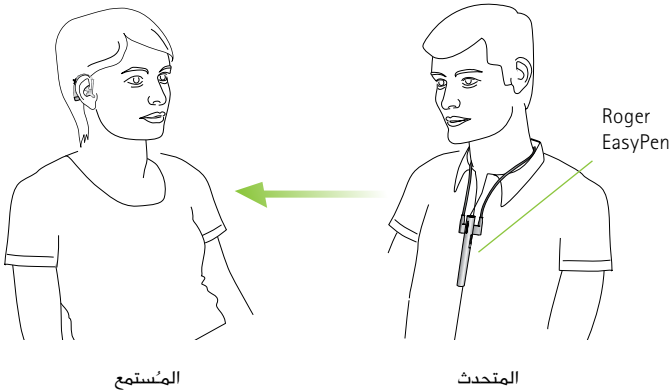


الخصائص:

- لا يحتاج إلى برمجه
- أوتوماتيكي الضبط
- يُمكن وصله بعدة أجهزة صوتية من خلال المدخل الصوتي
- مدخل USB صغيره للشحن والتحديث

حلول روجر لغايات التعليم



فهم المعلمة في غرفة الصف

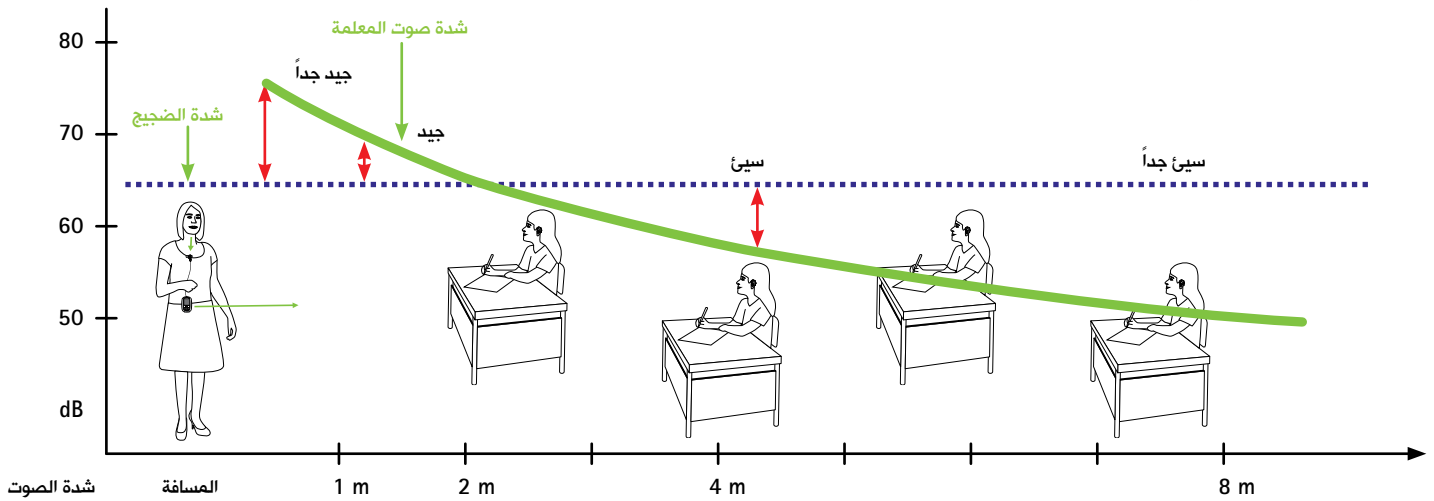


الغرفة الصفية				الطلاب				المعلمة	الحالة
Roger WallPilot	Roger DigiMaster X	Roger Dynamic SoundField	Roger AudioHub	Roger MyLink	Roger Focus	Roger Receivers	Roger DynaMic	Roger inspiro	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	الغرفة الصفية
		●		●	●	●	●	●	وجود أكثر من متحد في الغرفة الصفية
	●	●	●	●	●	●	●	●	حوار بين المعلمة والتلميذ أو بين التلميذ وتلميذ آخر
	●	●	●	●	●	●		●	إشارة صوتية من الكمبيوتر أو التلفاز أو الراديو وغيرها
●									التحويل الأوتوماتيكي لشبكة الاتصال
	●								أجهزة soundfield الأخرى

Roger Inspiro



كيفية الاستخدام

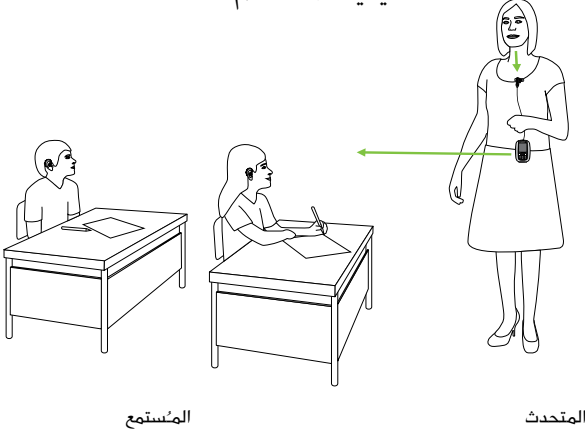

الخصائص:


- لا يحتاج الى برمج
- عرض أوسع لقائمة خيارات لمزايا أكثر تطوراً
- شبكة أكثر من متحدث تسمح لإتصال ٣٥ جهاز بذات الوقت
- ميكروفون محمي
- بطارية تدوم حتى ١٢ ساعة عمل متواصلة
- يغطي حتى مسافة ٢٠ م
- متوافقه مع انظمة إف إم
- ميكروفون توجيهي
- مدخلة USB صغيره للشحن والتحديث

Roger Dynamic

مايكروفون يعمل مع جهاز Roger Inspiro لخلق شبكة اتصال لتسهيل تواصل الطلاب مع بعضهم البعض



كيفية الاستخدام

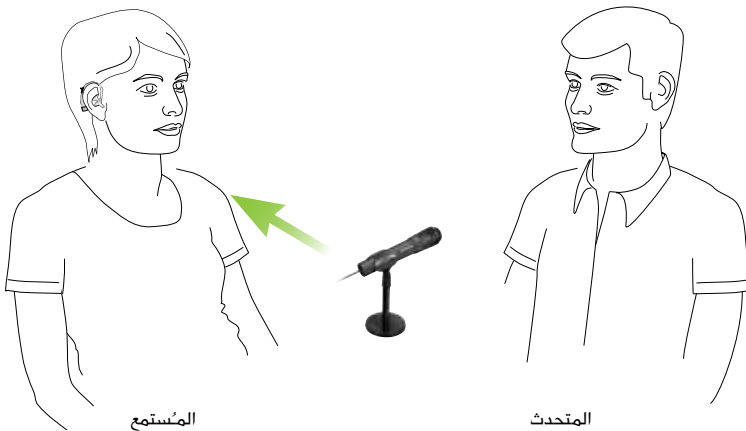

الخصائص:

- تحسين الإشارة الكلامية مقارنة مع الضجيج
- سهل الاستخدام
- خفيف الوزن

مستقبلات روجر المتوافقة مع السماعات

صُممت فوناك مجموعة من مستقبلات روجر المتطورة الحاصلة على أفضل أداء في تعزيز فهم الحديث في الضجيج. كما أن هذه المستقبلات أثبتت فعاليتها بنسبة أعلى تصل إلى ٥٤٪ مقارنة مع أجهزة FM والأجهزة الرقمية الأخرى و٣٥٪ مقارنة مع أنظمة FM الديناميكية.

الخصائص:

- خاصية التكيف الذكية مع الأصوات لتحسين الإشارة الكلامية حتى بأعلى مستويات الضجيج
- إمكانية تكبير الإشارة الكلامية إلى ٢٠ ديسبل
- موديلات متوافقة مع جميع أنواع السماعات الطبية و أجهزة القوقعة
- صغيرة الحجم وأنيقة التصميم



مستقبلات روجر المتوافقة مع أجهزة القوقعة

طورت فوناك العديد من المستقبلات المتوافقة مع أجهزة زراعة القوقعة لتحسين أداء جهاز القوقعة وخصوصاً بالضجيج. وتتميز تلك المستقبلات بتوافقها مع جميع أنواعها وأشكالها بغض النظر عن الشركة المُصنعة لها.


الخصائص:

- حجم صغير جداً
- تصميم أنيق
- متوافقة مع مرسلات روجر اللاسلكية



مستقبلات Roger Focus

كيفية الاستخدام

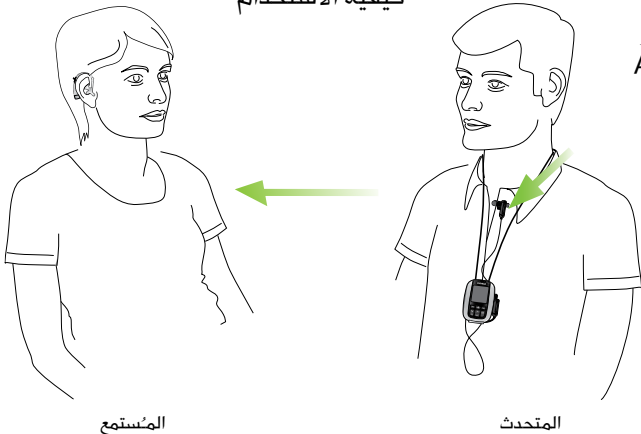

صُممت للطلاب الذين يسمعون بأذن واحد أو يعانون من بعض الأمراض مثل التوحد وAPD

الخصائص:

- سهولة التركيب والاستخدام
- خاصية تكيفية ديناميكية
- مفتاح تحكم بالصوت
- تصميم أنيق
- ضد الرطوبة والغبار
- متوافق مع جميع ملحقات فوناك اللاسلكية



مُكبرات روجر الصوتية الديناميكية للغرف الصفية

أفضل جهاز تم تطويره لمساعدة الطلاب على سماع صوت المعلم بكل وضوح بغض النظر عن مساحة الغرفة الصفية لتحسين التحصيل الأكاديمي عند الطالب، ومنح المعلم راحة في التعامل مع الطلاب وتسهيل عملية نقل المعلومة لهم. ويعتبر هذا الجهاز مفيداً لكل من الطلاب الذين يتمتعون بسمع طبيعي والطلاب الذين يعانون من ضعف سمع.

7000 Roger Digimaster


الخصائص:

- مناسب للغرف التي مساحتها ٢٠٠ م^٢
- يأتي بمكبري صوت يحتوي كل منهما على ١٦ مكبر صوت صغير وجهاز Inspiro متصل لاسلكياً معه سهل الاستخدام
- متوافق مع أنظمة إف إم التقليدية

5000 Roger Digimaster

الخصائص:

- مناسب للغرف التي مساحتها ٢٠٠ م^٢
- يأتي بمكبر صوت واحد قابل للنقل يحتوي ١٢ مكبر صوت صغير وجهاز Inspiro متصل لاسلكياً معه سهل الاستخدام
- متوافق مع أنظمة إف إم التقليدية

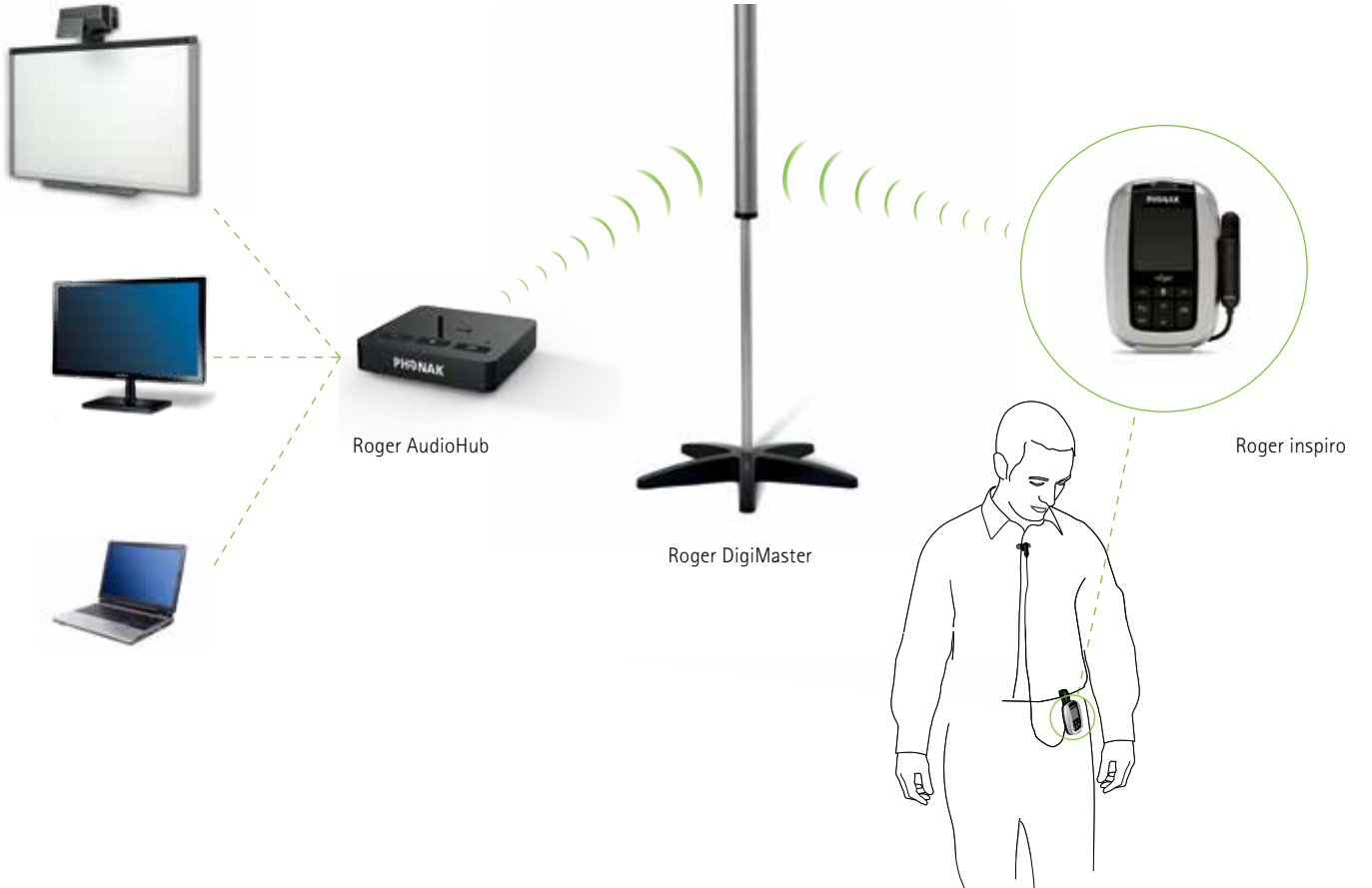

Roger Audio HUB

جهاز ربط مرن يصل بين جميع أجهزة وسائط الاتصال المتعددة مع مكبر الصوت حتى يضمن للطلاب تجربة سمعية مماثلة لتجارب الطلاب الذين يتمتعون بسمع طبيعي.



الخصائص:

- ٢ مدخل صوتي
- شبكة أكثر من متحدث
- خاصية التسجيل الصوتي
- سهولة الاستخدام
- متوافقة مع Roger Inspiro
- متوافق مع أنظمة إف إم التقليدية

Roger Digimaster X

محول ذكي لتطوير المكبرات الصوتية الأخرى.



الخصائص:

- سهل الاستخدام وثنمه مقبول لتحويل المكبرات الصوتية التقليدية الى ديناميكية التي يمتاز بها نظام روجر
- صوت فائق الوضوح
- خاصية التسجيل الصوتي
- امكانية اضافة مايكروفون آخر في حال وجود أكثر من متحدث
- متوافق مع أنظمة إف إم التقليدية


Roger WallPilot

جهاز يتم تركيبه بحائط في الغرف الصفية والقاعات الكبيرة مثل قاعات المحاضرات، حيث يعمل اوتوماتيكياً على ربط جهاز الاستقبال لدى الطالب مع جهاز الإرسال المستخدم بالقاعة التي يتواجد بها.



الخصائص:

- ذو مدى قابل للتعديل
- يمكن تثبيته على الحائط أو الطاولة
- متوافق مع جميع أنظمة روجر

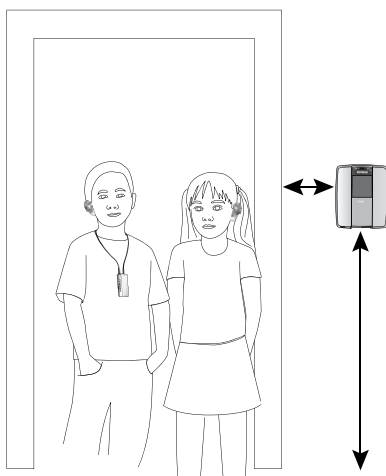

فوناك... الشركة الرائدة عالمياً في مجال الصحة السمعية.

منذ أكثر من ستون عاماً يعمل خبراء السمعيات والتكنولوجيا لدينا بالتعاون مع خبراء الصحة السمعية وأخصائي البحث الطبي ليشكلوا شراكة مهمة جداً أثمرت نتائجها عن تقديم تكنولوجيا فريدة متطورة ساعدتنا بتحسين حياة الملايين حول العالم بشكل كبير.

مع فوناك الشركة الرائدة عالمياً بتكنولوجيا السمع و مستشارك الطبي، أنت في يدٍ آمنة في سعيك نحو سمعٍ أفضل.

عيش الحياة

نحن معنيون وملزمون بتلبية حاجات الأفراد الذين
يعتمدون على خبراتنا وابتكاراتنا وعنايتنا. نتحدى بإبداع
حدود التقنيات المعروفة لنطور أجهزة سمعية تساعد
الأفراد على السماع بمختلف البيئات الصوتية والتمتع بحياة
طبيعية.

تفاعل بحرية، تواصل بثقة
وعيش الحياة

www.phonakpro.com